

Passos para uma punção bem-sucedida

1 Preparar



Rode e desbloqueie a tampa, conforme se mostra

Alinhe a marca branca em relevo com a marca preta entalhada



Desaperte a tampa protetora redonda da lanceta, mas não a retire

Rode 1/4 de volta



Introduza a lanceta firmemente no dispositivo de punção

Empurre até a lanceta parar totalmente



Rode cuidadosamente a tampa protetora redonda para a remover

Guarde a tampa para eliminar a lanceta usada



Volte a colocar a tampa

Faça-a dar um estalido para que fique bloqueada

2 Puncionar



Rode o seletor de intensidade para ajustar a profundidade de punção

1 para mais a superficial e 5 para a mais profunda



Puxe para trás a pega de reposição até o botão de liberação ficar levantado



Pressione o dispositivo de punção com firmeza contra a parte lateral do dedo e pressione o botão de liberação

Ouvirá um estalido quando a lanceta se libertar

3 Ejetar



Retire a tampa

Coloque a tampa de proteção que guardou numa superfície plana. Empurre a lanceta para dentro da tampa, tal como se mostra



Empurre para a frente o ejetor cinzento da lanceta até a lanceta cair no recipiente; em seguida, faça o ejetor deslizar para trás

Não se esqueça de voltar a colocar a tampa



Antes da utilização e para obter toda a informação, consulte o folheto informativo de MICROLET®NEXT



Microlet.
next Lancing Device

ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel

Tel.: 061 544 79 90
E-Mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

Contour.
diabetes solutions

ASCENSIA
Diabetes Care

Medidor CONTOUR®XT e sensores CONTOUR®NEXT

Instruções resumidas

Simple. Preciso.

multi
puls

NO CODING




Contour.
next Sensores

Contour.
Medidor de glicemia **XT**

PASSO 1: Introduzir o sensor

Introduza a extremidade cinzenta do sensor na abertura para o sensor do medidor de glicemia CONTOUR[®]XT. Assim o aparelho é automaticamente codificado! O medidor é ligado. No visor é indicado um sensor com uma gota de sangue a piscar, o que significa que o medidor está preparado para a medição de glicemia.

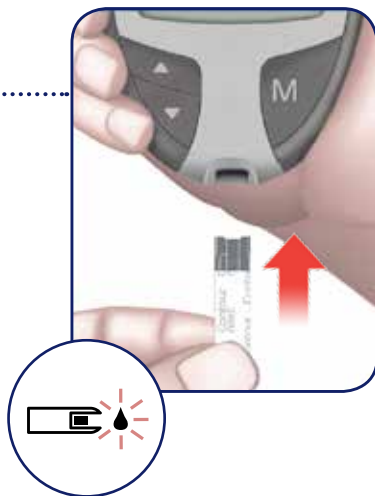

PASSO 2: Testar o sangue + indicar o resultado do teste

Mantenha a abertura de medição do sensor imediatamente em contacto com a gota de sangue. O sangue é automaticamente absorvido pelo sensor. Mantenha o sensor na gota de sangue até soar um sinal acústico.

Com o sinal acústico começam a contar os 5 segundos do tempo de medição. A seguir, o seu resultado de medição é indicado e automaticamente memorizado.



PASSO 3: Indicação do resultado do teste

Com o sinal acústico começam a contar os 5 segundos do tempo de medição. A seguir, o seu resultado de medição é indicado e automaticamente memorizado.



PASSO 4: Remover o sensor

A seguir à medição, ao tirar o sensor usado do CONTOUR[®]XT o aparelho é desligado automaticamente.



Sensores CONTOUR[®]NEXT

Os sensores CONTOUR[®]NEXT estão disponíveis em embalagens com 50 ou 100 unidades.

