

Как правильно выполнить прокалывание

1 Подготовка



Поверните и разблокируйте наконечник, как показано на рисунке
Совместите серую выступающую метку с черной углубленной меткой



Ослабьте закругленный защитный колпачок ланцета, но не снимайте его
Поверните колпачок на ¼ оборота



Плотно вставьте ланцет в прокалыватель
Протолкните ланцет в прокалыватель до упора



Осторожно открутите закругленный защитный колпачок ланцета
Сохраните его для удаления в отходы ланцета



Вновь присоедините наконечник
«Щелкните», чтобы зафиксировать наконечник

2 Прокалывание



Отрегулируйте глубину прокола с помощью поворотной части наконечника
Риска 1 соответствует самому неглубокому проколу, а 5 — самому глубокому



Оттяните ручку взвода назад так, чтобы кнопка пуска оказалась в верхнем положении.



Плотно прижмите прокалыватель к боковой поверхности подушечки пальца и нажмите на кнопку спуска
Вы услышите щелчок в момент спуска ланцета

3 Извлечение



Снимите наконечник
Поместите отложенный ранее в сторону защитный колпачок на плоскую поверхность. Протолкните ланцет в наконечник, как показано на рисунке



Протолкните серый механизм извлечения ланцета вперед так, чтобы ланцет упал в контейнер, а затем отведите его назад
Не забудьте вновь присоединить наконечник



Перед использованием и для получения более подробной информации см. вкладыш к прокалывателю MICROLET®NEXT

Microlet.
next Lancing Device

Contour.
diabetes solutions

ASCENSIA
Diabetes Care

Глюкометр CONTOUR®XT и тест-полоски CONTOUR®NEXT

Краткое руководство пользователя

Простота и точность

multi
puls



NO CODING



Contour.
next
Blood Glucose Test Strips


Contour.
XT
Blood Glucose Monitoring System

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel

Tel.: 061 544 79 90
E-Mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

ДЕЙСТВИЕ 1 Вставить тест-полоску

Введите серый конец тест-полоски в отверстие, предусмотренное для него в глюкометре CONTOUR[®]XT. При этом осуществляется автоматическое кодирование прибора! Прибор включается. На дисплее появляется символ тест-полоски с мигающей каплей крови. Это означает, что прибор готов к проведению замера уровня сахара в крови.

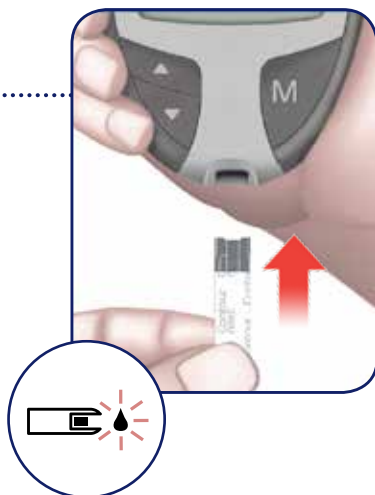

ДЕЙСТВИЕ 2 Анализ крови и отображение результатов

Приложите измерительное отверстие тест-полоски к капле крови. Кровь автоматически всасывается в тест-полоску. Держите тест-полоску приложенной к капле крови до тех пор, пока не прозвучит сигнал.

С подачей сигнала начинается 5-секундный отсчёт времени, за которое осуществляется анализ крови. После этого Ваш результат измерения выводится на дисплей и автоматически сохраняется.



ДЕЙСТВИЕ 3 Отображение результата измерений

С подачей сигнала начинается 5-секундный отсчёт времени, отведённый для анализа. После этого Ваш результат* измерения выводится на дисплей и автоматически сохраняется.



ДЕЙСТВИЕ 4 Удаление тест-полоски

При изъятии использованной в результате замера тест-полоски глюкометр CONTOUR[®]XT автоматически отключается.



Тест-полоски CONTOUR[®]NEXT

Тест-полоски CONTOUR[®]NEXT поставляются в упаковках по 50 или 100 штук.

