

# Guida rapida per il vostro pungidito

## MICROLET®NEXT

### 1 Preparazione



**Girare il coprilancetta come da illustrazione e toglierlo**

Il segno in rilievo e il segno inciso nero devono essere l'uno di fronte all'altro.



**Allentare il cappuccio di protezione della lancetta, senza staccarlo**

Ruotarlo di un quarto di giro.



**Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo pungidito**

Spingere la lancetta fino al completo arresto.



**Staccare con cautela il cappuccio di protezione rotondo**

Conservare il cappuccio per smaltire la lancetta dopo l'uso.



**Riposizionare il coprilancetta**

Il coprilancetta è correttamente riposizionato quando si sente un clic.

### 2 Puntura



**Impostare la profondità di puntura con il selettore del coprilancetta**

1 per la profondità di puntura minima, 5 per la massima.



**Tirare indietro l'impugnatura fino alla comparsa del pulsante di rilascio**



**Premere con decisione il pungidito contro il lato del dito e azionare il pulsante di rilascio**

Al rilascio della lancetta si sente un clic.

### 3 Espulsione



**Togliere il coprilancetta**

Collocare su una superficie piana il cappuccio di protezione precedentemente conservato. Spingere la lancetta nel cappuccio come da illustrazione.



**Spingere in avanti il pulsante grigio per l'espulsione della lancetta, lasciar cadere la lancetta nel contenitore e riportare indietro il pulsante**

Non dimenticare di riposizionare il coprilancetta.



**Prima dell'uso e per informazioni complete, leggere il foglietto illustrativo di MICROLET®NEXT**



**Microlet.**  
next Pungidito

Contour.  
diabetes solutions


ASCENSIA  
Diabetes Care

## Glucometro CONTOUR®XT e strisce reattive CONTOUR®NEXT

### Guida rapida

Facile. Preciso.

multi  
puls

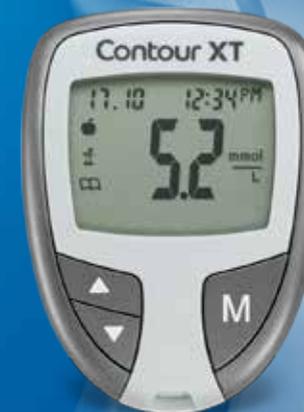

CODIFICA  
AUTOMATICA



Contour.  
next Strisce  
reattive

Contour.  
XT  
Glucometro


ASCENSIA  
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel

Tel.: 061 544 79 90  
E-Mail: info@ascensia.ch  
www.ascensia-diabetes.ch

## FASE 1: inserimento della striscia reattiva

Inserite l'estremità grigia della striscia reattiva nell'apposita apertura del misuratore di glicemia CONTOUR<sup>®</sup>XT. In questo modo l'apparecchio viene codificato automaticamente! L'apparecchio si accende. Sul display si visualizza una striscia reattiva con una goccia di sangue lampeggiante: questo simbolo avverte che l'apparecchio è pronto per la misurazione della glicemia.

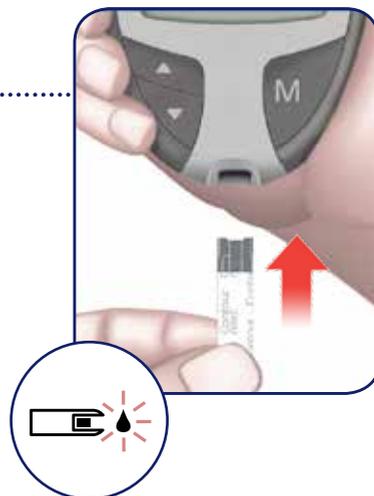

## FASE 2: test sul sangue

Mettete subito a contatto l'estremità di misurazione della striscia reattiva con la goccia di sangue. Il sangue viene assorbito automaticamente dalla striscia reattiva. Tenete la striscia reattiva a contatto con la goccia di sangue finché sentirete un segnale sonoro.



## FASE 3: visualizzazione del risultato

Dal segnale sonoro partono i 5 secondi necessari alla misurazione. Subito dopo si visualizza il risultato, che è automaticamente memorizzato.



## FASE 4: estrazione della striscia reattiva

Se al termine della misurazione estraete la striscia reattiva dall'apparecchio CONTOUR<sup>®</sup>XT, questo si spegne automaticamente.



## Strisce reattive CONTOUR<sup>®</sup>NEXT

le strisce reattive CONTOUR<sup>®</sup>NEXT sono disponibili in confezioni da 50 o 100 pezzi.

