

Başarılı bir parmak delme işlemi için adımlar

1 Hazırlama



Uç kapağını şekilde gösterildiği gibi çevirerek kilidini açın
Beyaz kabartmalı işareti ve siyah girintili işareti hizalayın



İğnenin üzerindeki yuvarlak koruyucu kapağı gevşetin ama çıkarmayın
1/4 oranında çevirin



İğneyi parmak delme cihazının içine sıkıca yerleştirin
İğneyi tamamen duruncaya kadar itin



Yuvarlak koruyucu kapağı dikkatlice çevirerek çıkartın
Kullanılmış iğneyi atmak için başlığı saklayın



Uç kapağını tekrar takın
Kilitlemek için 'Tık' sesi gelene kadar çevirin

2 Delme



Delme derinliğini ayarlamak için uç kapağı kadranını çevirin
En yüzeysel için 1, en derin için 5 ayarını seçin



Serbest bırakma düğmesi yükselene kadar sıfırlama kolunu geri çekin



Parmak delme cihazını parmağınızın yan tarafına sıkıca bastırın ve serbest bırakma düğmesine basın
İğne serbest kalınca bir tıklama sesi duyacaksınız

3 Çıkarma



Uç kapağını çıkarın
Daha önce saklamış olduğunuz koruyucu kapağı düz bir yüzeye yerleştirin. İğneyi şekilde gösterildiği gibi kapağın içine itin



Gri iğne çıkarıcıyı iğne kap içine ileriye itin ve sonra çıkarıcıyı geri kaydırın
Uç kapağını tekrar takmayı unutmayın

Kullanımdan önce ve tam bilgi almak için lütfen MICROLET®NEXT prospektüsüne bakın



Microlet next Lancing Device

ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel

Tel.: 061 544 79 90
E-Mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

Contour
diabetes solutions

ASCENSIA
Diabetes Care

**CONTOUR®XT Ölçüm Aleti ve
CONTOUR®NEXT Duyargaçları**

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kolay. Hassas.

multi
puls



NO CODING




Contour next Duyargaçları

Contour XT
Aparat matës i sheqerit në gjak

ADIM 1: Duyargacın sokulması

Duyargacın gri ucunu CONTOUR[®]XT Kan Basıncı Ölçüm Aletinin duyargaç deliğine sokunuz. Alet otomatik olarak bir numara atayacaktır! Ölçüm aleti çalışmaya başlar. Gösterge ekranında yanıp sönen kandamlaşı ile birlikte bir duyargaç resmi belirir. Ölçüm aleti artık kullanıma hazırdır.

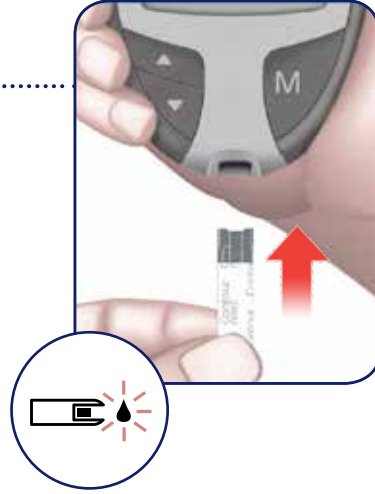

ADIM 2: Kan Testi + Test Sonucunun Ekranında Gösterilmesi

Aletin kan testini yapan ağzını hemen çıkan kandamlaşının yanına getiriniz. Kan hemen duyargacın içine çekilecektir. Duyargaç sinyal sesi gelinceye kadar bu pozisyonda tutmaya devam ediniz.

Sinyal sesi ile birlikte 5 saniye sürecek ölçüm süresi de başlamış olur. Bitiminde ölçüm sonucu belircek ve otomatik olarak hafızaya kaydedilecektir.



ADIM 3: Test Sonucunun Ekranında Gösterilmesi

Sinyal sesi ile birlikte 5 saniye sürecek ölçüm süresi de başlamış olur. Bitiminde ölçüm sonucu ekranda belircek ve otomatik olarak hafızaya kaydedilecektir.



ADIM 4: Duyargacın çıkarılması

Kullanılmış duyargacı ölçümden sonra CONTOUR[®]XT içinden çıkardığınızda, alet otomatik olarak kapanacaktır.



CONTOUR[®]NEXT Duyargaçları

CONTOUR[®]NEXT Duyargaçları 50 veya 100 tanelik paketlerde satılmaktadır.

